



VOORREINIGING NA DE ENDOSCOPISCHE PROCEDURE

De Pre-Clean Kit van ENDOSS maakt directe voorreiniging van flexibele endoscopen en andere medische instrumenten mogelijk. Reiniging aan het bed van de patiënt voorkomt indroging van organisch materiaal en ondersteunt een effectieve herverwerking.

De kit bevat een voorgedoseerde reinigings-spons met **Dr. Weigert MediClean Advanced** concentraat en een hersluitbaar zakje met vulindicator voor 500 ml. Na toevoeging van water ontstaat direct de juiste reinigings-oplossing voor een efficiënt en reproduceerbaar proces.

Waarom kiezen voor Pre-Clean Kit?


- Hygiënisch
- Reproduceerbaar
- Direct inzetbaar na endoscopie
- Vergroot de veiligheid van medewerkers
- Compact en eenvoudig te gebruiken
- Geschikt voor diverse flexibele endoscopen en ander instrumentarium
- Optimale eerste stap in voorreiniging
- Compabiliteit van het detergent **Dr. Weigert Mediclean Advance**

Easy - Efficient - Effective

Eenvoudig in 3 stappen

- 1 **Vullen** - Voeg water toe tot aan de 500 ml-vullijn.
- 2 **Activeren** - Knijp enkele malen in de voorgedoseerde reinigingsspons om het enzymatische reinigingsconcentraat vrij te geven.
- 3 **Reinigen** - Neem de buitenzijde van de endoscoop af en zuig de oplossing door de kanalen volgens de instructies van de fabrikant.

INSTRUCTIONS FOR FLEXIBLE ENDOSCOPES

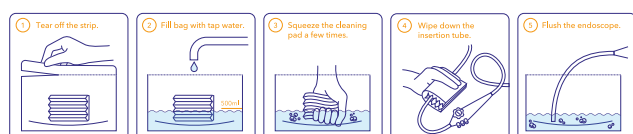

Toepassing

Geschikt voor de directe voorreiniging na het onderzoek van onder andere:

- Gastro-intestinale endoscopen
- Bronchoscopen
- KNO-endoscopen
- Urologische endoscopen
- Gynaecologische endoscopen
- Overige compatibele herbruikbare medische instrumenten

Toepasbaar binnen de endoscopie, OK, polikliniek, verpleegafdelingen en andere zorgomgevingen waar point-of-use reiniging vereist is.

Waarom enzymatische pre-reiniging?

Tijdens een endoscopische procedure blijven bloed, slijm, eiwitten, vetten, koolhydraten en micro-organismen achter in en op de endoscoop. Water verdunt deze vervuiling, maar breekt deze niet actief af. Daarom adviseren internationale richtlijnen zoals **ESGE**, **ESGENA** en **SGNA** om direct na de procedure te starten met bedside pre-cleaning. Dit vermindert de microbiële belasting, voorkomt indroging van organisch materiaal en draagt bij aan een effectieve herverwerking.



De kracht van enzymatische reiniging met Dr. Weigert

De Pre-Clean Kit bevat een voor gedoseerde enzymatische reiniger die helpt biologische vervuiling af te breken voordat deze kan indrogen.

- Proteasen helpen eiwitten af te breken.
- Lipasen helpen vetten los te maken.
- Amylasen helpen koolhydraatvervuiling af te breken.
- Helpt vervuiling vochtig te houden tijdens transport.
- Optimale aansluiting op voorreiniging en machinale reiniging & desinfectie.

Elke minuut telt

Organisch materiaal begint direct na de procedure in te drogen. De **Pre-Clean Kit** activeert het reinigingsproces onmiddellijk aan het bed van de patiënt. Dankzij de voor gedoseerde enzymatische reiniger worden eiwitten, vetten en andere biologische vervuiling losgemaakt voordat deze zich kunnen hechten aan de kanalen en oppervlakken van de endoscoop. Dit ondersteunt een consistente, reproduceerbare en richtlijnconforme point-of-use reiniging.

Pre-Clean Kit

Art nr:	80014
Verpakking:	• 1 voorgedoseerde reinigings spons met MediClean Advanced concentraat • 1 hersluitbaar zakje met 500 ml vulindicator
Besteleenheid:	doos 50 stuks