

PRODUCTEN RONDOM DE ENDOSCOPISCHE PROCEDURE



PRODUCT CATALOGUS 2026

ENDOSCOPIE

Voor een veilig en optimaal verloop van elke endoscopische procedure biedt ENDOSS een compleet assortiment hoogwaardige disposables. Deze producten ondersteunen infectiepreventie, vergroten het patiëntcomfort en dragen bij aan een efficiënte werkwijze binnen de endoscopieafdeling.



Single-use biopsieventiel Olympus/Fujinon
Voor Olympus/Fujinon endoscopen

ART. NR. 30012
VE 4x100



Single-use biopsieventiel Pentax
Voor Pentax endoscopen

ART. NR. 30016
VE 4x100



Single-use bijtring voor volwassenen
Met patiëntvriendelijke elastieke textielhoofdband

ART. NR. 30025
VE 4x100



Onderzoeksbroek endoscopie
Met opening aan de achterkant en elastieken band

ART. NR. 55015
VE 1x100

PRE-CLEAN KIT

VOORREINIGING NA DE ENDOSCOPISCHE PROCEDURE

De Pre-Clean Kit van ENDOSS maakt directe voorreiniging van flexibele endoscopen en andere medische instrumenten mogelijk. Reiniging aan het bed van de patiënt voorkomt indroging van organisch materiaal en ondersteunt een effectieve herverwerking.

De kit bevat een voorgedoseerde reinigingsspons met **Dr. Weigert MediClean Advanced** concentraat en een hersluitbaar zakje met vulindicator voor 500 ml. Na toevoeging van water ontstaat direct de juiste reinigungsoplossing voor een efficiënt en reproduceerbaar proces.

Waarom kiezen voor Pre-Clean Kit?

- Hygiënisch
- Reproduceerbaar
- Direct inzetbaar na endoscopie
- Vergroot de veiligheid van medewerkers
- Compact en eenvoudig te gebruiken
- Geschikt voor diverse flexibele endoscopen en ander instrumentarium
- Optimale eerste stap in voorreiniging
- Compatibiliteit van het detergent **Dr. Weigert Mediclean Advanced** concentraat

Eenvoudig in 3 stappen

- 1 **Vullen** - Voeg water toe tot aan de 500 ml vullijn.
- 2 **Activeren** - Knijp enkele malen in de voorgedoseerde reinigingsspons om het enzymatische reinigungsconcentraat vrij te geven.
- 3 **Reinigen** - Neem de buitenzijde van de endoscoop af en zuig de oplossing door de kanalen volgens de instructies van de fabrikant.

INSTRUCTIONS FOR FLEXIBLE ENDOSCOPES



Toepassing

Geschikt voor de directe voorreiniging na het onderzoek van onder andere:

- Gastro-intestinale endoscopen
- Bronchoscopen
- KNO-endoscopen
- Urologische endoscopen
- Gynaecologische endoscopen
- Overige compatibele herbruikbare medische instrumenten

Toepasbaar binnen de endoscopie, OK, polikliniek, verpleegafdelingen en andere zorgomgevingen waar point-of-use reiniging vereist is.

Waarom enzymatische pre-reiniging?

Tijdens een endoscopische procedure blijven bloed, slijm, eiwitten, vetten, koolhydraten en micro-organismen achter in en op de endoscoop. Water verdunt deze vervuiling, maar breekt deze niet actief af. Daarom adviseren internationale richtlijnen zoals **ESGE**, **ESGENA** en **SGNA** om direct na de procedure te starten met bedside pre-cleaning. Dit vermindert de microbiële belasting, voorkomt indroging van organisch materiaal en draagt bij aan een effectieve herverwerking.

De kracht van enzymatische reiniging met Dr. Weigert

De Pre-Clean Kit bevat een voor gedoseerde enzymatische reiniger die helpt biologische vervuiling af te breken voordat deze kan indrogen.


- Proteasen helpen eiwitten af te breken
- Lipasen helpen vetten los te maken
- Amylasen helpen koolhydraatvervuiling af te breken
- Helpt vervuiling vochtig te houden tijdens transport
- Optimale aansluiting op voorreiniging en machinale reiniging & desinfectie

Elke minuut telt

Organisch materiaal begint direct na de procedure in te drogen. De Pre-Clean Kit activeert het reinigingsproces onmiddellijk aan het bed van de patiënt. Dankzij de voor gedoseerde enzymatische reiniger worden eiwitten, vetten en andere biologische vervuiling losgemaakt voordat deze zich kunnen hechten aan de kanalen en oppervlakken van de endoscoop. Dit ondersteunt een consistente, reproduceerbare en richtlijnconforme point-of-use reiniging.

Kenmerken:

- Gebruiksvriendelijke reinigingsmethode
- Consistent en reproduceerbaar
- Compatibel met alle flexibele endoscopen
- Verpakking: 1 voorgedoseerde reinigingsspons met **MediClean Advanced** concentraat en 1 hersluitbaar zakje met 500 ml vulindicator

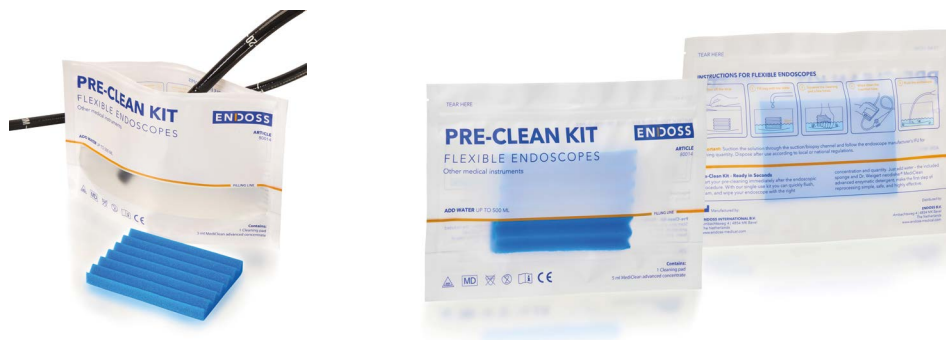

Pre-Clean Kit
Detergent-geïmpregneerde spons

ART. NR. 80014
VE 50

RAGERS

Ragers vormen een betrouwbare, snelle en effectieve methode voor de handmatige reiniging van kanalen in flexibele endoscopen. Als onderdeel van de voorreiniging helpen zij vervuiling te verwijderen en dragen zij bij aan een optimaal vervolg van het reinigings- en desinfectieproces. Tijdens het reinigen kan de gebruiker bovendien direct eventuele weerstand, beschadigingen of obstructies in het kanaal signaleren. Geen enkele endoscoop is hetzelfde. Daarom biedt ENDOSS een breed assortiment ragers, afgestemd op verschillende kanaaldiameters, kanaallengtes en reinigingsmethoden. Dankzij meer dan 20 jaar ervaring ondersteunen onze ragers zowel gangbare als internationaal toegepaste werkwijzen.

Voor iedere toepassing is een geschikte oplossing beschikbaar. Onderzoek toont aan dat de reinigings-effectiviteit sterk afhankelijk is van de gekozen rager en reinigingsmethode. Het is daarom belangrijk dat de gebruiker altijd verifieert welke rager geschikt is voor de betreffende endoscoop en het betreffende kanaal.

Onze "Push&Pull" ragers die wij al in 2007 ontwikkelden, geeft het beste reinigingsresultaat. Eerst wordt een standaard rager door het kanaal geduwd en daarna wordt het de lange, absorberende staart door het kanaal getrokken.

Maar we bieden ook allerlei opties voor het meer traditionale ragen waarbij de rager twee of meer keren heen en weer door het kanaal wordt gehaald.

Voor extra bescherming zijn ENDOSS-ragers voorzien van een beschermend invoerkapje, waardoor het risico op beschadiging tijdens het inbrengen wordt geminimaliseerd.

RAGERS OP MAAT EN TOEPASSINGEN

Heeft u vragen over de verschillen tussen uitvoeringen, reinigingsmethoden of productspecifieke varianten als gevolg van lokale regelgeving? Onze specialisten adviseren u graag.

Al onze ragers zijn voorzien van GS1 code, per stuk verpakt in een dispensordooz voor hygiënisch gebruik en EO-treated.



SINGLE BRUSH

De Single Brush is voorzien van één borstel en wordt gebruikt volgens de invoer- en terughaalmethode. De rager wordt ingebracht in het kanaal en vervolgens weer teruggetrokken om vervuiling effectief te verwijderen. Deze werkwijze wordt, afhankelijk van de gebruikersinstructie of richtlijnen, meerdere keren herhaald.

Kenmerken:

- 5mm diameter borstel
- Gemakkelijk in gebruik
- Geschikt voor zowel doorhalen als terughalen




DOUBLE BRUSH

De Double Brush heeft aan beide uiteinden van de draad een borstel. Hierdoor kan voor zowel de invoer- als de terughaalfase een schone borstel worden gebruikt. De rager is geschikt voor reiniging van het ventielhuis naar het distale uiteinde en van het ventielhuis naar de connector.

Kenmerken:

- 5mm diameter borstel
- Gemakkelijk in gebruik
- Geschikt voor zowel doorhalen als terughalen

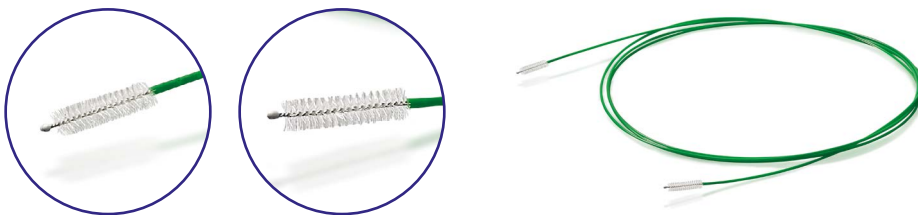


SUPERFINE BRUSH

Zeer fijne borstels maken het mogelijk de kleinste kanalen te reinigen.

Kenmerken:

- Geschikt voor kanaaldiameter tussen 1,0 en 1,5mm
- Per stuk verpakt en voorzien van GS1 code

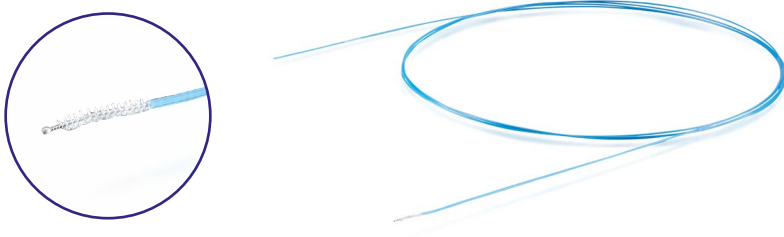


PUSH & PULL RAGERS

De Push & Pull ragers van ENDOSS zijn in 2007 al ontwikkeld met een Nederlands ziekenhuis. Het doel was een ragermethode die aantoonbaar maximale reiniging geeft met één doorhaalbeweging. In de bijna 20 jaar dat Endoss dit type rager maakt zijn er vele honderduizenden endoscopen in de wereld mee voorgereinigd.

Kenmerken:

- Significant beter reinigingsresultaat LOG4
- Beschikbaar in verschillende diameters en lengtes
- Eén keer ragen reinigt beter dan drie keer traditioneel ragen
- Per stuk verpakt en voorzien van GS1 code

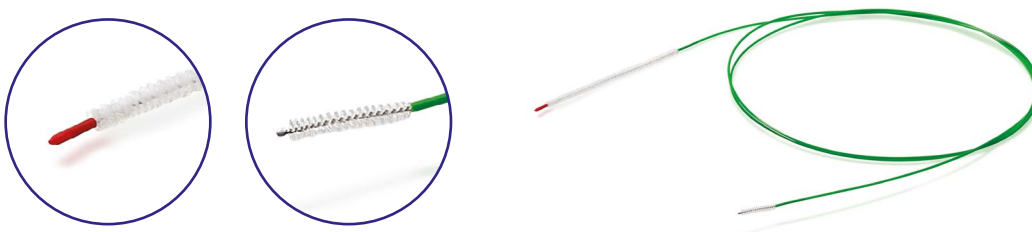


MULTIPOINT BRUSH

Deze ragers zijn voorzien van drie borsteldelen. Aan beide uiteinden en één op circa 20cm van het uiteinde. Hiermee is een betere reiniging mogelijk.

Kenmerken:

- Drie borstels
- Gemakkelijk in gebruik
- Lengte 230cm

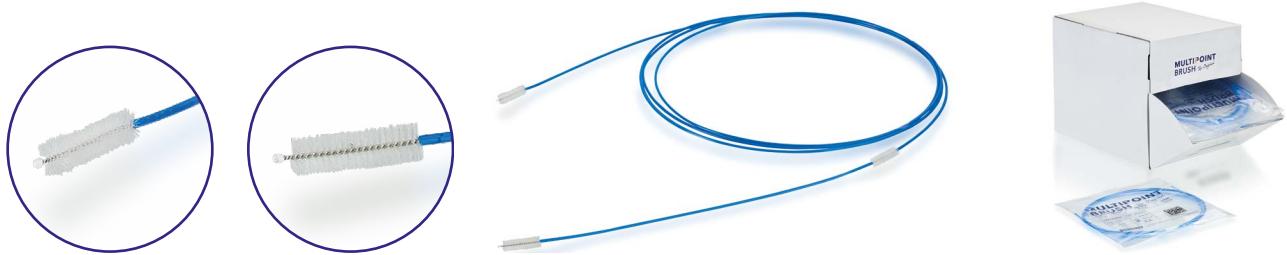


COMBI BRUSH

De Combi Brush combineert een kanaalborstel en ventielborstel in één product. Het handvat biedt extra grip tijdens het terughalen, waardoor de reiniging eenvoudig en efficiënt kan worden uitgevoerd.

Kenmerken:

- Handvat voor extra grip bij het terughalen
- Ventiel en kanaalborstel in één

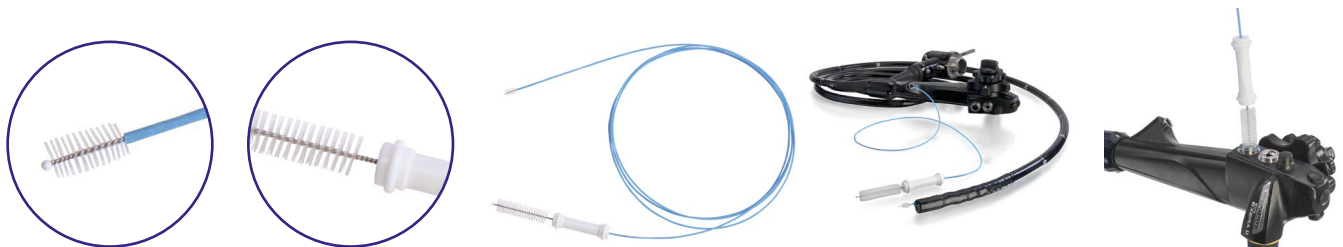

COMBI KIT

De Combi Kit combineert de Push & Pull rager en de 2-Sided Brush voor ventielen in één set. Omdat deze producten vaak samen worden gebruikt, biedt de kit een praktische oplossing die zorgt voor minder verpakkingen op de afdeling, eenvoudiger voorraadbeheer door minder artikelnummers en een lager risico op hergebruik.

Kenmerken:

- Ruimtebesparing op de afdeling (minder dozen)
- Minder bestelnummers
- Minder risico op hergebruik



VALVES & PORTS BRUSH

De Valves & Ports Brush is speciaal ontwikkeld voor de reiniging van ventielopeningen. Dankzij het handvat biedt de borstel extra grip tijdens gebruik, terwijl de twee verschillende borsteldiameters in één product zorgen voor een efficiënte reiniging van diverse openingen. De borstels zijn verpakt in een praktische dispenserdoos voor eenvoudig gebruik en opslag.

Kenmerken:

- Handvat voor extra grip
- Samen verpakt in dispenserdoos
- Twee borsteldiameters in één



RAGERS TABEL

OMSCHRIJVING ART. NR. VE	Ø in mm DIAMETER VAN HET KANAAL	Ø in mm – L in cm DIAMETER EN LENGTE VAN DE DRAAD	Ø in mm – L in mm DIAMETER EN LENGTE VAN DE BORSTEL	
SINGLE BRUSH 10010 4 X 100	2.0 - 4.5	Ø 1.7 – L 230	Ø 5.0 – L 20	
DOUBLE BRUSH 10020 4 X 100	2.0 - 4.5	Ø 1.7 – L 230	Ø 5.0 – L 20	
SUPER FINE 10023 1 X 50	1.2 - 1.8	Ø 1.0 – L 230	Ø 2.0 – L 15	
SUPER FINE 10028 1 X 50	1.0 - 1.5	Ø 0.8 – L 110	Ø 1.5 – L 10	
SUPER FINE 10038 1 X 50	1.0 - 1.5	Ø 0.8 – L 380	Ø 1.5 – L 10	
PUSH & PULL 10030 4 X 100	1.8 - 3.0	Ø 1.5 – L 160	Ø 3.0 – L 20	
PUSH & PULL 10040 4 X 100	1.8 - 3.0	Ø 1.5 – L 120	Ø 3.0 – L 20	
PUSH & PULL 10050 4 X 100	2.0 - 4.5	Ø 1.7 – L 160	Ø 5.0 – L 20	
PUSH & PULL 10055 4 X 100	2.0 - 4.5	Ø 1.7 – L 230	Ø 5.0 – L 30	
MULTI POINT 10056 4 X 100	2.0 - 4.5	Ø 1.5 – L 230	Ø 4.0 – L 20	
MULTI POINT 10058 4 X 100	3.0 - 6.0	Ø 1.7 – L 230	Ø 6.0 – L 20	

OMSCHRIJVING ART. NR. VE	Ø in mm DIAMETER VAN HET KANAAL	Ø in mm – L in cm DIAMETER EN LENGTE VAN DE DRAAD	Ø in mm – L in mm DIAMETER EN LENGTE VAN DE BORSTEL	
COMBI BRUSH 10065 4 X 100	2.0 - 4.5	Ø 1.6 – L 230	Ø 6.0 – L 7	
COMBIKIT 10075 (10055 EN 10060) 4 X 100	–	–		
COMBIKIT 10077 (10050 EN 10060) 4 X 100	–	–		
VALVE & PORTS BRUSH 10060 4 X 100	–	–	Ø 11.0 – L 35 Ø 5.0 – L 20	

De vermelde aanbevelingen zijn indicatief en gebaseerd op algemene productspecificaties. Controleer altijd of de gekozen rager geschikt is voor de betreffende endoscoop en toepassing. Ragers dienen te allen tijde uitsluitend te worden gebruikt in een natte endoscoop. ENDOSS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een onjuiste productkeuze of onjuist gebruik op basis van dit overzicht.

TRANSPORT

TIPBESCHERMERS


Tipbeschermers beschermen de kwetsbare distale tip van endoscopen en hulpmiddelen tijdens transport, opslag en gebruik. Dit uiteinde bevat gevoelige componenten zoals lenzen, lichtgeleiders en kanaal-openingen. Beschadigingen aan de distale tip kunnen leiden tot kostbare reparaties en ongewenste uitval van de endoscoop.

ENDOSS biedt verschillende typen tipbeschermers, vervaardigd uit diverse materialen en geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Het beschermende ontwerp voorkomt direct contact met andere oppervlakken, waardoor de kans op stoot- en transportschade aanzienlijk wordt verminderd.

De Scope Guard biedt als extra voordeel dat deze ook gebruikt kan worden tijdens het afnemen en hanteren van de endoscoop, waardoor de tip gedurende het gehele proces beschermd blijft.


Kenmerken:

- EO (Ethyleenoxide) behandeld voor microbiologische veiligheid tijdens opslag
- Geschikt voor vrijwel alle gangbare endoscoopmaten
- Single-use uitvoering helpt het risico op kruisbesmetting te verminderen

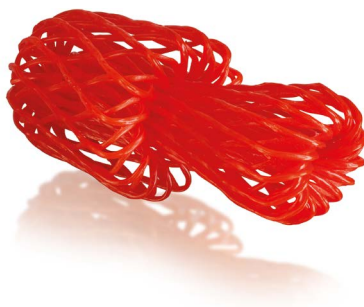

Mesh Protector Small red

ART. NR. 22026
VE 4x100

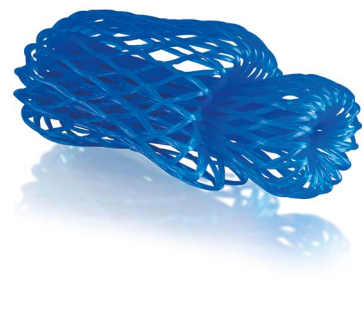

Mesh Protector Large blue

ART. NR. 22027
VE 4x100



Scope Guard Small

Ook geschikt voor het afnemen van de endoscoop

ART. NR. 22006
VE 4x50



Scope Guard Medium

Ook geschikt voor het afnemen van de endoscoop

ART. NR. 22007
VE 4x50



Scope Guard Large

Ook geschikt voor het afnemen van de endoscoop

ART. NR. 22008
VE 4x50

SMILEY HOEZEN

Voor een duidelijke visuele marking van vuil en schoon tijdens transport en opslag biedt ENDOSS smiley hoezen in diverse afmetingen. De hoezen zijn geschikt voor verschillende transportbakken en maken de status van de inhoud direct herkenbaar. Dankzij de smiley-opdruk aan alle zijden zijn de hoezen vanuit iedere positie goed zichtbaar, wat bijdraagt aan een veilige en overzichtelijke logistieke workflow.

De smiley hoezen zijn EO (Ethyleenoxide) behandeld voor microbiologische veiligheid tijdens opslag, verkrijgbaar in verschillende maten en ontworpen voor eenmalig gebruik. Hierdoor wordt niet alleen het logistieke proces vereenvoudigd, maar ook het risico op kruisbesmetting verminderd.

Kenmerken:

- EO Behandeld
- Verschillende maten beschikbaar
- Smileys aan alle zijdes




SMILEY HOEZEN TABEL

ART. NR.	TRANSPORTBAK AFMETING IN CM	VE	
22011	51X51	66X50	
22013	30X40	4X50	
22014	60X40	4X50	
22015	57X54	1X300	
22016	43X55	1X300	
22017	52X42	4X50	

KWEKEN

ENDOSS SAMPLING KIT VOOR FLEXIBELE ENDOSCOPEN

De Endoss Sampling Kit is een steriele single-use oplossing voor betrouwbare microbiologische monsterafname van flexibele endoscopen. Dankzij het gesloten systeem, de roterende kanaalselector en de mogelijkheid om zes kanalen afzonderlijk te bemonsteren, ondersteunt de kit een gestandaardiseerde, veilige en reproduceerbare werkwijze. De kit is gebruiksvriendelijk, door één persoon toepasbaar en geschikt voor de meest voorkomende Olympus® flexibele endoscopen.

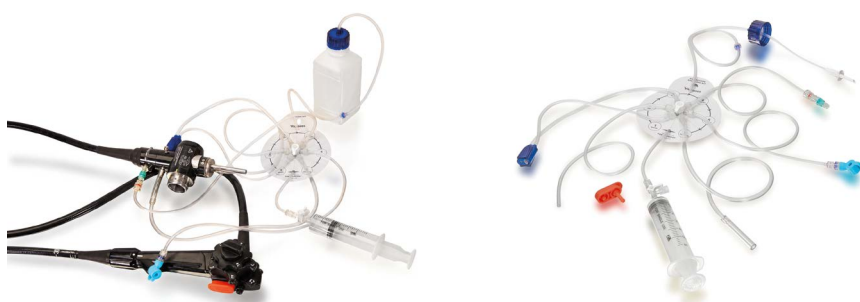


Sampling Kit
Olympus®

ART. NR. 40118
VE 10x1

STERIELE RAGER

Steriele Sampling Brush is een steriele single-use rager voor microbiologische monsterafname van endoscoopkanalen. Geschikt voor toepassing binnen de Flush-Brush-Flush bemonsteringsmethode, waarbij het kanaal mechanisch wordt geborsteld om micro-organismen en residuen effectief vrij te maken voor kweekonderzoek. Ondersteunt een betrouwbare en gestandaardiseerde microbiologische controle van flexibele endoscopen.

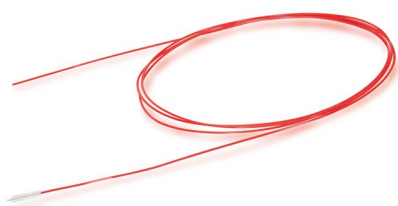

NON-MD Sterile brush for sampling
Olympus®

ART. NR. 40110
VE 4x100

SURROGAAT ENDOSCOOP

Een innovatieve oplossing voor gestandaardiseerde validatie en periodieke kwaliteitscontrole van endoscoopdesinfectoren. De surrogaat endoscoop ondersteunt zorginstellingen bij het objectief beoordelen en borgen van de prestaties van het reprocessingproces.

Binnenkort beschikbaar.

OVER ENDOSS B.V.


ENDOSS is een toonaangevende Nederlandse fabrikant & distributeur van medische hulpmiddelen, gespecialiseerd in flexibele endoscopie, patiëntveiligheid en infectiepreventie. Sinds 2008 leveren wij onze hoogwaardige producten aan ziekenhuizen, klinieken en praktijken wereldwijd.

ENDOSS staat voor betrouwbaar, veilig, gebruiksvriendelijk en innovatief.

Alle producten worden vervaardigd onder een ISO 13485:2016 kwaliteitsmanagementsysteem en voldoen, waar van toepassing, aan de vereisten van de Europese Medical Device Regulation (MDR) en dragen een CE-markering. Voor toepassingen waarvoor aanvullende regelgeving geldt, waaronder FDA vereisten, adviseren wij u graag over de beschikbare mogelijkheden.

Vragen over onze producten of interesse in een sample? Neem contact op met onze Medical Devices Expert, Inge van Zundert, via info@endoss.nl. Zij helpt u graag verder.

HIER VIND JE ONZE WERELDWIJDE VERKOOPPARTNERS

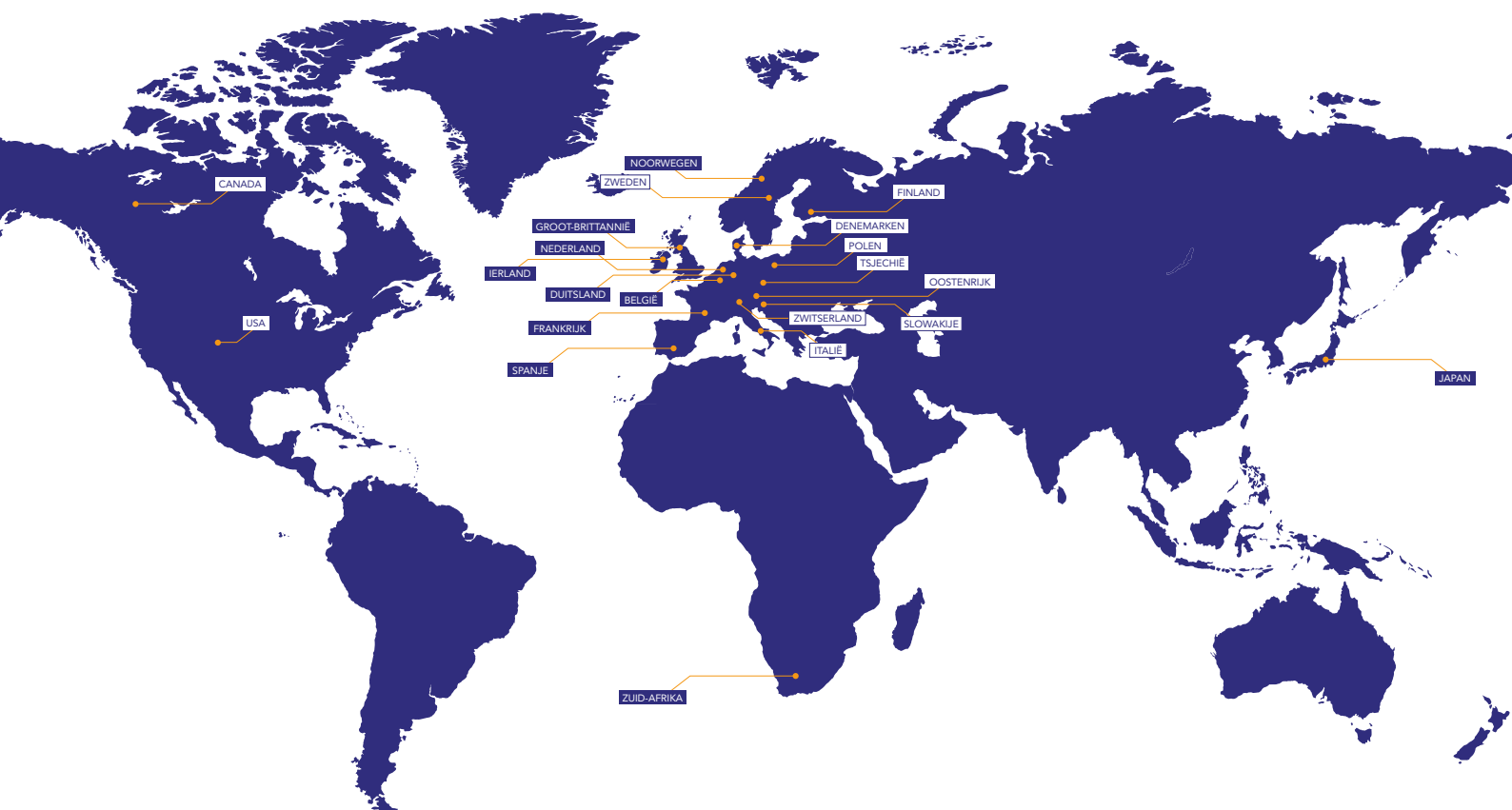

ENDOSS B.V.

Ambachtsweg 4 | 4854 MK Bavel
www.endoss.nl | www.endoss-medical.com

CUSTOMER SERVICE

+31 (0)76-303 0343
order@endoss.nl

ALGEMENE INFO

+31 (0)76 - 53 09 268
info@endoss.nl